





技术参数

电源电压	AC 220V±10% 50Hz
最大功率	1200W
整机尺寸 (含手轮)	D760*H1200*W700 (835) mm
重量	约140kg
切片厚度设定范围	设定值: 0.5µm~100µm 步进量: 0.5µm~5µm
修片厚度设定范围	设定值: 0µm~600µm 步进量: 5µm~50µm
冷冻室/样本头	化霜形式: 手动/自动 制冷方式: 压缩机
速冻台	最低温度: -55°C

基本配置

货号	品名	单位	数量
5500-00-01	刀架	个	1
5500-00-02	玻璃门	个	1
5500-00-04	样本托	个	10
5500-00-06	废料槽	个	1
5500-00-07	导热展平锤	个	1
5500-00-12	防卷板	个	1
5500-00-16	废液桶	个	1
6013351	CS35 一次性刀片	盒	1


微小控制板图识

-  样本头慢速移动
-  样本头快速移动
-  UV紫外线消毒开关
-  冷冻室照明开关

可选耗材

货号	品名	包装
6013351	CS35 一次性刀片	20片/盒
6300050	冷冻包埋剂	50ml/瓶
6300100	冷冻包埋剂	100ml/瓶
6300120	冷冻包埋剂	120ml/瓶
6300200	冷冻包埋剂	200ml/瓶
5300050	冷冻切片固定液	50ml/瓶
5300500	冷冻切片固定液	500ml/瓶
5500-00-04	样本托 (红、蓝、银色可选)	10个/包

特约经销商



维格斯官方网站

维格斯官方微信

广州维格斯生物科技有限公司

地址: 广东省广州市增城区新塘镇银沙二路4号

电话: 020-8779 3718

传真: 020-8779 3728

网址: www.wexisgp.com

邮箱: marketing@wexisgp.com

维格斯医疗集团有限公司

地址: 香港新界荃湾南丰中心1905室

电话: 00852-69165385



维·格斯 C 5500 冷冻切片机

■ 卓越

■ 高效

■ 品质

C 5500冷冻切片机

C 5500冷冻切片机可以为生物组织的分析研究提供快速、优越的组织切片。功能完备、切片平整、厚度均一、无褶皱，为用户提供高质量的组织切片。操作舒适、安全、易于使用，且方便清洁，并配备了消毒功能。



模块化控制系统

- 手动/自动除霜、休眠，自由设定时间，降低功耗；
- UV紫外线消毒；
- 切片/修片模式快速切换；
- 可控制样本头快/慢速进退。



手轮制动

- 带可锁定功能的手轮，可以在任意位置锁定，保证安全的情况下进行样本更替；
- 操作轻便、稳定，高效率下保证品质。

美观、操作舒适的外观设计

- 人机工程学一次性成型外壳；
- 流线美观，外形光滑易于清洁；
- 防雾电加热玻璃门可有效防止雾和冷凝水的产生，为操作者提供了清晰的观察窗口。




高效、宽敞的操作空间

- 双压缩机制冷工作；
- 多点高效制冷；
- 冷冻室可同时容纳24个标本；
- 温度从室温降至-30°C只需 20 分钟以内（根据室温而定）。

优越的切片性能

- 样本头角度可调；
- 样本回缩功能，可按需求数值直接输入；
- 防卷板可进行水平、竖直、夹角和缝隙的调整；
- 具备三级进刀控制模式。

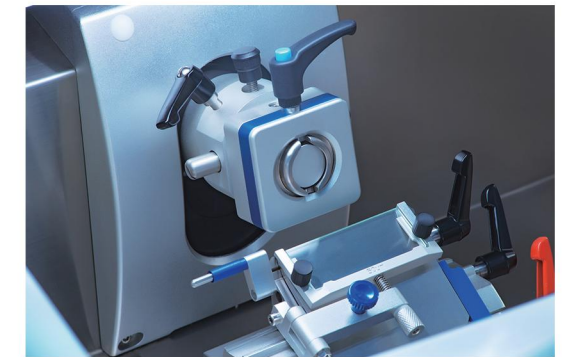

直观的高清触摸屏

- 7英寸彩色触摸屏操作界面；
- 配置多语种，操作简单，页面设计简约、直观。