

轮转式切片机 M3040

Wexis

维·格斯石蜡切片机

相关参数:

最大标本尺寸	50*60*40 (mm)
切片厚度设定	设定值: 0.5~5 μm, 步进量: 0.5 μm 设定值: 5~20 μm, 步进量: 1 μm 设定值: 20~40 μm, 步进量: 2 μm 设定值: 40~60 μm, 步进量: 5 μm 设定值: 60~100 μm, 步进量: 10 μm
修片厚度设定	设定值: 1~10 μm, 步进量: 1 μm 设定值: 10~20 μm, 步进量: 2 μm 设定值: 20~50 μm, 步进量: 5 μm 设定值: 50~100 μm, 步进量: 10 μm 设定值: 100~200 μm, 步进量: 20 μm 设定值: 200~600 μm, 步进量: 50 μm

标本回缩 5~250 μm 可选, 默认值为 40 μm

垂直方向行程 72±1mm

进样范围 28±1mm

样本钳调整角度 水平/垂直±10°, 360° 旋转

整机重量 (包含刀架) 27kg

整机外尺寸 530*445*295 (mm)

订货信息:

名称	M3040 轮转式切片机
货号	3040-00-00
型号	M3040

备案号: 粤穗械备20210346

M3040, 轮转式切片机



特约经销商



维·格斯官方微信

广州维格斯生物科技有限公司
地址: 广东省广州市增城区新塘镇沙
埔银沙二路4号 (维格斯产业园)
电话: 020-8779 3718

邮编: 511 338
传真: 8620-8779 3728
网址: www.wexisgp.com
邮箱地址: marketing@wexisgp.com

品牌: 维·格斯
产地: 中国·广州

性能特点

- 有精细的进样控制系统，为切片及修片提供更多的厚度选择；
- 有自动对刀功能、自动回复起始位功能、待机保存设定功能；
- 72mm垂直行程为切片操作人员提供更宽敞的切片体验；
- 更加精准的样本头定位功能；
- 可自由选择合适的样本回缩厚度；
- 可根据使用需求加装不同类型的快放钳；
- 刀架锁稳定牢固，角度调节精准，便捷性好。



型号：M3040




刀架



品牌：维·格斯
产地：中国·广州

超大彩色触摸屏

- 7寸电容式触摸屏包含所有操作信息；
- 屏幕采用倾斜式外观设计和符合人体工程学的工作扶手，
- 在保证操作的安全性外提供良好的使用手感。

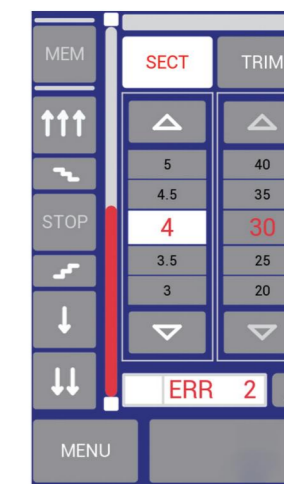

7寸彩色触摸屏

人性化设计

- 旋转飞轮便捷轻快，不费力，减缓操作疲劳；
- 旋转飞轮可以在任意位置进行锁定；
- 通过严格工程测试，使用寿命长；
- 超大的废屑托盘，提高清洁度，附有手臂休息台面可以减缓操作疲劳。



旋转飞轮



◆ 备案号：粤穗械备20210346