

Wexis FL220 漂烤片仪是病理工作流程中非常重要的辅助工具，广泛用于医学实验室、科研机构及组织学实验室的组织切片、病理性调查及分析的玻片制备中。

漂、烤片
一体化

微电脑
精确控温

分离式
铝合金水槽

漂片烤片一体化设计

- 漂片功能、烤片功能相互独立，由不同的控制面板精确控制

人体工程学
设计



微电脑精确控温

- 精确控制和温度自动调节
- 温度调节范围：0~99℃
- 漂片、烤片温度分别独立控制，LED数字化显示参数，用户可设定自动存储

维格斯集团有限公司是一家集研发、制造于一体的专业生产商，集团公司拥有专业的技术人才，先进的研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间，积极为广大客户提供高效、稳定、可靠的病理仪器、耗材及试剂。



FL220 漂烤片仪

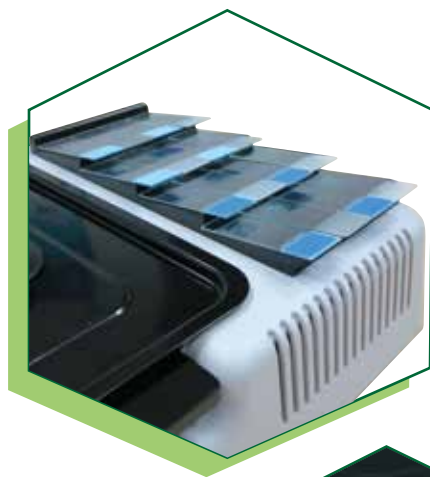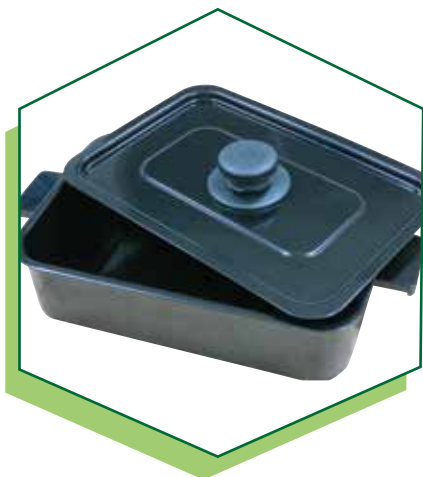

分离式水浴槽设计，让水更换或清洁变得如此简单，维护极为方便。

“叠加式”烤片台设计，拥有4个斜面平台，最多可一次性烤片16张。

铝合金水浴槽和烤片台表面均进行了黑色涂层处理，强烈的颜色对比让石蜡切片更易观察。

采用人体工程学设计,机身小巧轻薄，40°倾斜薄膜按键面板，让操作更舒适。



特殊的PE条状(设计外壳，防水绝缘，让用户使用更安全、更轻松。

技术参数

外型尺寸	415mm*310mm*120mm
水浴槽面积	220mm*145mm
烤片台面积	248mm*107mm
重量	5.45Kg
输入电压	AC220~50Hz 0.3A
额定功率	260W (漂片-200W;烤片-60W)
烤片温度	室温 - 99°C
烤片准确度	温度设定 ± 2°C
漂片温度	室温 - 99°C
漂片准确度	温度设定 ± 2°C
到达设定温度时间	<30mins
以上规格摄取	室温 25°C
产品认证	CE 质检认证单位



订货详情

订货号	313080001
型号	FL220
名称	FL220漂烤片仪
相关配件包括	主机 1台 水浴槽 1件 水浴槽盖 1件 电源线 1根 使用说明书 1本
备注	图片仅供参考，具体以实物为准。

维格斯小仪器系列



TR302 修蜡仪



DR230 烤片仪



WD360 熔蜡仪

维格斯集团有限公司
地址:香港新界荃湾南丰中心1905室
电话: 852-69165385

广州维格斯生物科技有限公司
地址:广东省广州市增城区新塘镇银沙二路4号
电话: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728



www.wexisgp.com