


维格斯切片用一次性刀片

维格斯一次性刀片选用最优质的碳钢，在专业的制造过程中引入了最新的技术，优质选材、精工制作，一次性刀片能通过锐利度和耐久性等多重评估及测试。



刀锋边缘的观察『扫描电镜×20,000』

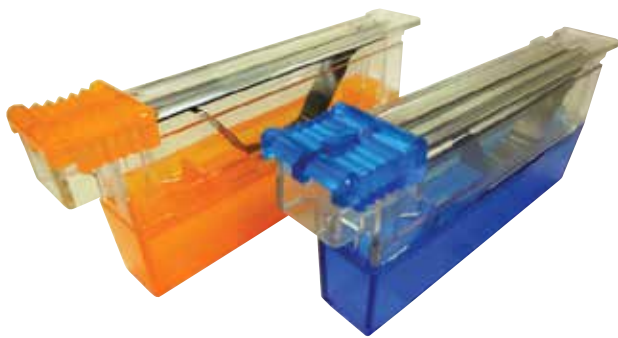

惊人锐利及耐用性

刀锋边缘采用离子清洗技术，加上特氟隆涂层保证了刀片具有惊人的锐利度及耐用性。一片刀片可以轻松的切片50至60块活检组织蜡块或35至40块常规组织块，切片厚度可达到3微米。

轻易切割硬组

SS35型号刀片能轻易切割硬组织如子宫肌瘤、前列腺瘤、乳腺瘤和甲状腺瘤等。

保持组织原始形状

使用DS35型号刀片能保持切片一致，组织不会变形。

防止卷片


刀片的特殊处理具有防卷片功效，更加方便摊片步骤。

订货号

<p>货号 312070001</p> <p>名称 切片用一次性刀片(DS35)</p> <p>包装 50片/盒,10盒/包装</p> <p>规格 35° 80X8X0.254mm</p>	<p>312070002</p> <p>切片用一次性刀片(SS35)</p> <p>50片/盒,10盒/包装</p> <p>35° 80X8X0.254mm</p>
--	--



常规组织学刀片，适用于各种组织及各品牌各型号的病理组织切片机，拥有优越的耐用性及优良切割能力。

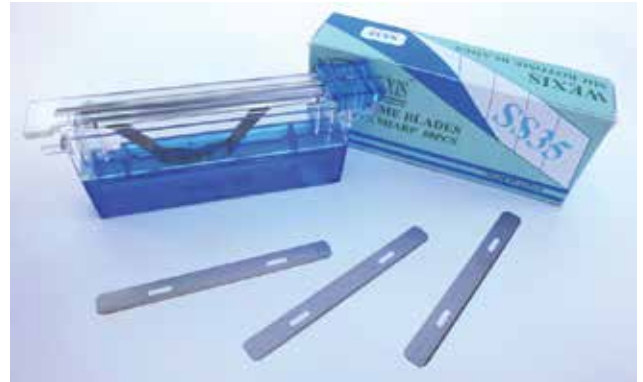

拥有更锋利的刀锋。特别适合用于切割较硬的组织，如子宫瘤，前列腺瘤，乳腺癌等；同样亦保持优良的耐用性。

*图片只供参考，产品以实物为准。

公司简介

维格斯是病理仪器、耗材、试剂集研发、制造的一家生产商。集团公司拥有专业的技术人才，先进仪器研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间。我们累积多年的研发和制造经验，结合全球病理领域发展的先进技术，完善设计和精湛的工艺水平，能保障全球的病理工作者使用到优质、可靠、高效的产品。

维格斯集团有限公司
地址:香港新界荃湾南丰中心1905室
电话: 852-69165385

广州维格斯生物科技有限公司
地址:广东省广州市增城区新塘镇银沙二路4号
电话: 8620-8779 3718
传真: 8620-8779 3728

网站: www.wexisgp.com

